

medisun® GS-10 / PS-20

ỨNG DỤNG TIỀN TIẾN TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI

Liệu pháp thân thiện với người dùng và gần như không gây đau để ngăn ngừa chứng tăng tiết quá nhiều mồ hôi mà không có bất kỳ tác dụng phụ



medisun® GS-10 / PS-20

DÒNG ĐIỆN XUNG TRONG TRỊ LIỆU NGĂN NGỪA TĂNG TIẾT MỒ HÔI

Khoảng 1% dân số đang bị chứng tăng tiết nhiều mồ hôi ở tay, chân hoặc nách. Liệu pháp **medisun®** là một phương pháp điều trị khoa học đã được công nhận trong nhiều năm để ngăn ngừa bệnh tăng tiết mồ hôi. Phương pháp này có thể làm cho da trở nên khô như bình thường trong 98% tất cả các trường hợp mà không cần dùng thuốc hoặc các thủ tục phẫu thuật.

Liệu pháp tăng tiết mồ hôi của **medisun®** tuyệt đối an toàn, hầu như không gây đau đớn và không có bất kỳ tác dụng phụ nào nếu được thực hiện đúng cách. Điều trị bao gồm cho tay và chân. Miếng bọt biển đặc biệt được sử dụng để điều trị nách và mặt. Dòng điện mạnh có thể được điều chỉnh riêng cho từng trường hợp và được hạn chế mức tối đa.

Phương pháp an toàn tối tân ví dụ như bảo vệ chống lại sốc điện (hiệu ứng hàng rào đồng cổ) và giám sát ngâm thông minh bao gồm chức năng bảo vệ quá liều, mang lại sự thân thiện tối đa cho người dùng đối với các thiết bị trị liệu **medisun®**. Các thiết bị trị liệu **medisun®** được vận hành đơn giản và độ tin cậy cao nhất với hiệu quả tối đa.

medisun® GS-10 – Phiên bản phổ thông


medisun® GS-10 sử dụng công nghệ dòng điện một chiều đã được chứng minh trong lĩnh vực chữa bệnh bằng ion.



medisun® PS-20 – Phiên bản hiện đại

Các điểm nổi bật của medisun® PS-20

- **Trong quy trình** dòng điện xung, dòng điện được cố định ở một tần số sinh học có lợi cho cơ thể con người. Cảm giác dòng điện trị liệu gần như không có.
- **PS-20** có thể lưu ba thiết lập điều trị khác nhau (ví dụ: tay, chân, nách). Việc áp dụng điều trị trở nên quá dễ dàng do phương thức tự động.
- Chức năng cảm giác cho phép giảm hiệu suất đầu ra đến 50%. Với những bệnh nhân nhạy cảm hơn, ví dụ: trẻ em, hoặc các khu vực nhạy cảm như nách hoặc mặt có thể được điều trị riêng từng phần.

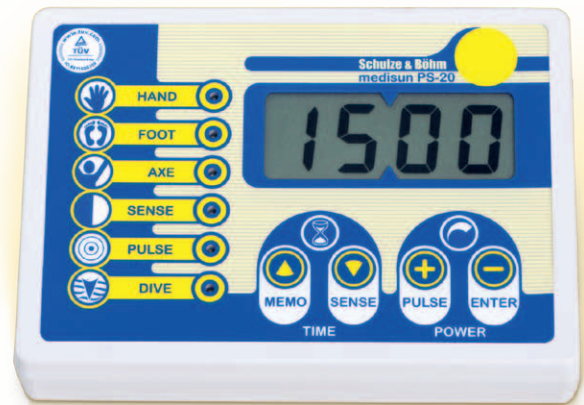

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO medisun® GS-10 / PS-20

- Thiết bị an toàn với giới hạn về dòng điện và chống sốc điện
- Chức năng bảo vệ quá liều và giám sát ngầm thông minh
- Có thể vận hành thiết bị mà không cần người hỗ trợ
- Liều điều trị có thể được điều chỉnh ngay cả trong khi đang điều trị
- Cài đặt trước liều điều trị liên tục
- Bắt đầu trị liệu tự động mà không cần công tắc hoạt động bên ngoài
- Kiểm soát bộ vi xử lý thông minh với chức năng ghi nhớ và hẹn giờ
- Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng do bàn phím bằng màng mỏng
- Nguồn điện 12V hoạt động an toàn.

Phụ kiện



Bồn điều trị



Điện cực nách



Liệu pháp điều trị tăng tiết mồ hôi medisun®

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Phương pháp điều trị bao gồm hai giai đoạn: Trong giai đoạn đầu tiên (điều trị ban đầu), việc điều trị được thực hiện và hướng dẫn bởi bác sĩ điều trị. Dịch tiết mồ hôi sẽ trở lại bình thường sau khoảng 10 lần điều trị. Sự theo dõi của bác sĩ là chứng minh về sự thành công ban đầu thường được yêu cầu bởi việc đảm bảo sức khỏe. Do đặc tính điều trị lâu dài của trị liệu medisun, nên liệu pháp medisun® có thể được thực hiện tại nhà với thiết bị của bệnh nhân. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng, điều trị duy trì bao gồm một đến ba buổi hàng tuần khoảng 10-15 phút mỗi lần.

Liệu pháp medisun® có thể được chỉ định bởi bác sĩ của bạn! Các chi phí cho một thiết bị trị liệu tại nhà siêu trị liệu có thể được bảo hiểm y tế chi trả sau khi nộp đơn xin hỗ trợ.



THIẾT BỊ TRỊ LIỆU

Các thiết bị trị liệu tại nhà medisun® đặc trưng bởi vận hành đơn giản, độ tin cậy tối đa và hiệu quả cao nhất. Phương pháp điều trị của thiết bị này được phát triển với sự hợp tác của các Bệnh viện đại học. Phiên bản phổ thông medisun® GS-10 áp dụng quy trình dòng điện trực tiếp. Phiên bản hiện đại medisun® PS-20 cung cấp bên cạnh quy trình dòng điện xung thuận lợi hơn cũng là các lợi ích khác cho một liệu pháp thoải mái và dễ chịu. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thông tin thiết bị liên quan.

PHƯƠNG PHÁP AN TOÀN

Các thiết bị trị liệu medisun® là các thiết bị y tế được chứng nhận CE. Do điều khiển được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý thông minh, các giá trị liều lượng là nhất quán và có thể tái điều trị. Các thiết bị medisun® cung cấp các phương pháp an toàn tối tân, như bảo vệ chống sốc điện, giám sát ngấm thông minh và chức năng bảo vệ quá liều và thân thiện với người dùng ở mức cao nhất.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vui lòng hỏi bác sĩ da liễu về liệu pháp medisun®. Chống chỉ định: Bệnh nhân có máy tạo nhịp tim, cấy ghép kim loại và khuyết tật da lớn, cũng như phụ nữ mang thai, không nên thực hiện liệu pháp này. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này!